

使い捨て簡易担架

ディスポ ストレッチャー




移動・搬送が一枚のシートで可能になる!



救急車へ移動



病院へ搬送

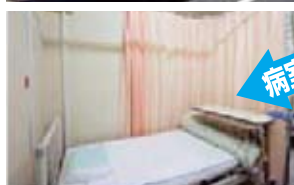

病室へ移動

出血・排泄物などブロックするためのフィルムが入っています。
 患者移動、ベッドからベッドへ、ベッドから手術台へ。



検査室へ移動

処置室へ移動



CTスキャンへ移動



レントゲン室へ移動



■ 使用上の注意

- 本品は基本的に使い捨てタイプです。
- 用途以外での使用はしないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 使用中、異常を感じたときは医師にご相談ください。
- 直射日光が当たる場所や、高温多湿な場所での保管を避けてください。(保管目安5年)



台紙とパッケージは、
 お住まいの自治体の定める
 方法により分別してください。



使用後は
 小さくたたんで
 医療廃棄物と
 して処理

仕様：持ち手8ヶ所プラス担架棒を通せる様になっているため、距離のある搬送にも対応します。

仕様：持ち手8ヶ所



●担架棒を差し込むことにより、安全荷重が強化されました。[意匠登録第1642884号取得]

CAPディスポストレッチャー・プラス
TSK-201 オープン価格
※最小発注単位:10枚


サイズ：使用時 82×198cm
収納時 23×27×4cm
重さ：約260g
材質：綿・ポリエチレン（株式会社昭栄商会製）

共通の特長

- ✓ シーツに直接患者情報を記載できるため、トリアージとして使用できます。
- ✓ 小さスペースで収納できるため、災害備蓄に適しています。
- ✓ 天然コットン使用で保温効果も期待できます。

CAPディスポストレッチャー・シート
SSK-101 オープン価格
※最小発注単位:10枚

サイズ：使用時 82×198cm
収納時 21×25×3cm
重さ：約200g
材質：綿・ポリエチレン（株式会社昭栄商会製）

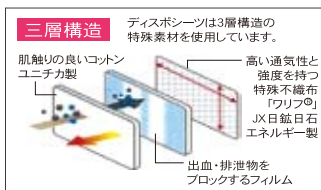

- 3層構造で肌触りのよいコットン(ユニチカ株式会社製)、強度を保つワリフ®(JX日鉱日石エネルギー製)、出血・排泄物をブロックするフィルムを採用しています。
- 静電効果により、電子医療機器誤作動防止の効果が期待できます。
- 天然コットン使用ですので、低アレルギーで肌に暖かく保温効果もあります。

■三連結担架棒 [意匠登録1642884号取得]



三連結担架棒(収納袋付)
PSS-023 **30,000円** (税込 33,000円)

サイズ：使用時 φ4×220cm
収納時 φ12×90cm
重さ：3.9kg
付属品：収納袋

●改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。●カタログに記載されている内容は、2021年6月現在のものです。



エアーストレッチャー® 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F
TEL:026-259-3400 FAX:026-259-3385
営業拠点:長野、関東、東海、関西
ホームページ: www.airstretcher.jp
E-mail: info.us@airstretcher.jp