

Airstretcher®

救える未来がここにある!!



お問合せ

製品に関するお問合せ / デモ依頼 / 見積依頼

web お問い合わせフォームより気軽にご連絡下さい。



エアーストレッチャー® 株式会社

〒380-0802 長野県長野市上松4丁目1番1号 1F
TEL: 026-259-3400 FAX: 026-259-3385
営業拠点: 長野、関東、東海、関西、九州、北海道
ホームページ: www.airstretcher.jp
E-mail: info.us@airstretcher.jp

R8.06.3500



回覧・保存版

災害対策・救急医療
資器材カタログ〈26 Vol.02〉



緊急搬送器具

緊急搬送器具(新生児)

災害用資器材(ベッド・他)

災害用資器材(テント)

災害支援チームウェア

感染症対策製品

www.airstretcher.jp



新生児から高齢者、さらにはご遺体の搬送に至るまで、38年間にわたり、最適な担架の設計と搬送後の安全な待機場所を追求してきました。

この長年の経験と研究の成果として、空気圧を利用した「エアーストレッチャー」が開発され、日米両国で特許を取得しました。

さらに、搬送後の安心を提供するために開発された「マリーベッド」は、簡易かつ信頼性の高い折り畳み式ベッドとして評価されています。

これらの製品を基盤に、米国ウエスタンシェルター社との総代理店契約を締結し、シェルターへの搬送を含む包括的な救助システムを構築しています。

このシステムは、迅速かつ安全な対応を求められる現場での信頼性を高め、確かな安全を提供します。

エアーストレッチャー株式会社
代表取締役 **櫻井 悦子**


Airstretcher®

■会社概要

商号	エアーストレッチャー株式会社
本社所在地	長野県長野市上松4丁目1番1号 1F
営業拠点	長野、関東、東海、関西、九州、北海道
事業内容	搬送器材・担架の製造・販売および輸出入 ウエスタンシェルターシステム販売 災害救援チーム資器材の製造・販売
設立	2012年6月26日
代表取締役	櫻井 悦子
資本金	7,770,000円(令和4年8月現在)
関連企業	キャピーインターナショナル株式会社(製造・輸入元) K・S・K GLOBAL NETWORK CORPORATION(輸出元) CAPPY VIETNAM COMPANY LIMITED(輸出元)


＜これまでの主な取り組みと活動＞(2025年12月時点)

- 2025年11月 :第22回千里メディカルラリー【大阪】(競技備品)
- 2025年9月 :内閣府防災推進国民大会(ぼうさいこくたい2025)【新潟】
- 2025年8月 :もしもFES 2025 渋谷【東京】
- 2025年4月 :WADDEM(世界災害救急医学会)【東京】
- 2025年4月 :レジリエンスセッション「震災と未来のこうべ博」【兵庫】
- 2025年4月 :2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)【大阪】(サプライヤー)
- 2025年3月 :第30回日本災害医学会総会・学術集会 記念大会【愛知】
- 2025年2月 :第4回 災害医療支援冬季対策 ～災害医療ロジスティクス研修(冬季版)～【岩手】
- 2024年10月 :令和6年度長野県総合防災訓練【長野】
- 2024年10月 :内閣府防災推進国民大会2024(ぼうさいこくたい2024 in 熊本)【熊本】
- 2024年9月 :第10回日本災害医療ロジスティクス研修(大槌高校)【岩手】
- 2024年6月 :日本赤十字社近畿ブロック研修会(応急救護所)【和歌山】
- 2024年2月 :第28回日本災害医学会総会・学術集会【京都】
- 2024年1月 :令和6年能登半島地震 緊急災害支援【石川】(物資支援)
- 2023年12月 :北海道SCU活動訓練【北海道】(SCU仮設救護所)
- 2023年11月 :第20回千里メディカルラリー【大阪】
- 2023年11月 :日本DMAT近畿ブロック訓練(応急救護所)【兵庫】
- 2023年10月 :日本赤十字社東北ブロック研修会【宮城】
- 2023年10月 :令和5年度長野県総合防災訓練【長野】
- 2023年9月 :内閣府防災推進国民大会2023(ぼうさいこくたい2023)
- 2023年9月 :第9回日本災害医療ロジスティクス研修(大槌高校)【岩手】
- 2023年5月 :G7広島サミット2023【広島】(医療救護現地対策本部、宿舍)
- 2023年3月 :第28回日本災害医学会総会・学術集会【岩手】
- 2023年2月 :第2回災害医療支援冬季対策【岩手／岩手山焼走り国際交流村】(雪上訓練)
- 2022年12月 :空飛ぶ捜索医療団「ARROWS」多機関連携災害時医療救助訓練【高知】
- 2022年11月 :第19回千里メディカルラリー with 阪大救命【大阪】
- 2022年9月 :第8回日本災害医療ロジスティクス研修(大槌高校)【岩手】
- 2022年9月 :令和4年度徳島県総合防災訓練【徳島】
- 2022年5月 :空飛ぶ捜索医療団「ARROWS」災害派遣トレーニング【広島】
- 2022年3月 :第27回日本災害医学会総会・学術集会【広島】
- 2021年11月 :HOSPEX JAPAN 2021【東京】(災害対策企画展示)
- 2020年2月 :第25回日本災害医学会総会・学術集会【神戸】
- 2020年2月 :第1回災害医療支援冬季対策【岩手/安比高原】(雪上訓練)
- 2019年11月 :第26回日本航空医療学会総会・学術集会【富山】
- 2019年10月 :緊急消防援助隊近畿ブロック訓練【松阪】(トリアージエリア)
- 2019年10月 :第7回日本災害医療ロジスティクス研修(大槌高校・宿舍)
- 2019年9月 :令和元年大規模地震時医療活動訓練【東京】(SCU仮設救護所)
- 2019年6月 :G20大阪サミット【大阪】(医療救護現地対策本部、宿舍)

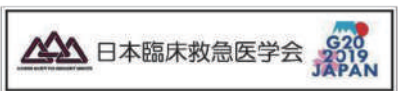

エアーストレッチャー(株) 令和6年能登半島地震 緊急災害支援について

■活動タイムライン

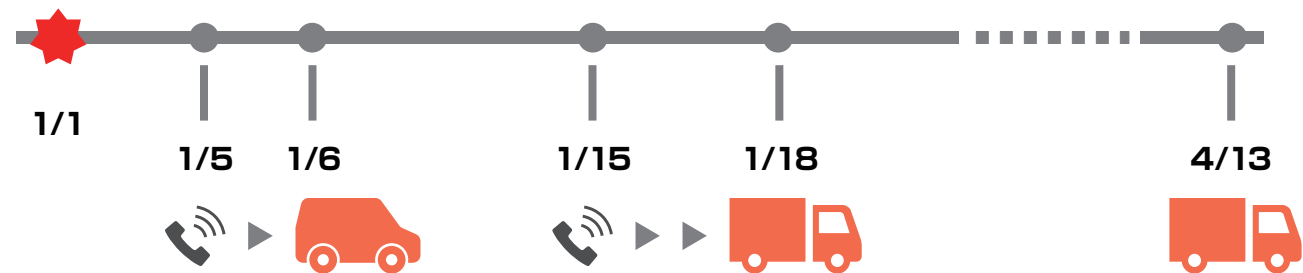

■緊急災害支援（1回目：2024年1月5日～6日）

1月2日から石川県珠洲市を拠点に活動を開始した NPO 団体からの要請に応じ、弊社は1月5日に緊急支援物資をお届けしました。この対応は、弊社と NPO 団体との協力支援協定に基づくものです。週末からの天候悪化が予測される中、石川県珠洲市およびその周辺地域における避難所の劣悪な環境、特に孤立集落での寒さ対策が急務とされていました。これを受けて、弊社は迅速にエアーマット 100 枚を準備し、同日 18:00 頃に積み込みを完了しました。しかし、夜間の被災地道路状況が危険と判断されたため、富山で一泊し、翌1月6日 11:30 に石川県珠洲市の健康増進センターに到着しました。ここで支援物資を集積所に搬入した後、NPO 団体ならびに DMAT チームによって各担当避難所へ物資が配布されました。これにより、週末からの悪天候に備えた避難所環境の改善が図られ、特に寒冷地での避難生活が少しでも安全かつ快適になるよう努めました。



■緊急災害支援（2回目：2024年1月17日～18日、4月13日）

1月15日 15:15 に、石川県珠洲市の健康増進センターを拠点に活動する NPO 団体から、救護活動から被災者支援へのニーズの変化に対応するための要請がありました。これにより、DMAT に加えて DPAT や日赤、薬剤師などの多職種が集結する中、自己完結が可能な NPO 団体が率先してベース基地の移動を決定しました。長期戦が予想されるため、スタッフの休息とリフレッシュを目的とした休憩室、食堂、会議室、およびシャワールームの設置サポートを求められました。弊社は1月17日にウエスタンシェルター、エントランス、コネクター、フィールドシャワー、フィールドエアコン、折りたたみベッド、石油給湯器、キャピーエアーマット 50 枚（新規避難所開設用資器材）などの物資を準備し、12:00 ごろ積込完了後、ベース基地移設先へ向けて出発しました。1月18日 9:30 に現地到着後、20 シェルター内にフィールドシャワーを男女別に設置し、1935 シェルターを NPO 団体スタッフの休憩室、食堂、ミーティングルームとして整備しました。さらに、1月19日には給湯器やフィールドエアコンの追加設置、シェルターの補修作業を行い、快適性を確認しました。4月13日同拠点の解体に伴い、資器材を回収しました。



緊急搬送器具

エアーストレッチャー / シーツ	レイズ・ローバル	5
	ラップ・ローバル	7
	レイズ・ローバル・スリム	7
	ラップ・ローバル・スリム	7
	FDM エアー / エアー・ローバル	8
	メッシュ・ローバル	8
	三連結担架棒（オプション）	9
	設置台くカバー付き>（オプション）	9
	500L 用 酸素ボンベリュック（オプション）	9
	アンプ パーフィットエース（オプション）	10
	FixPro for LUCAS'3	10
	CAP ディスボストストレッチャー・シート	10
	アジャストストレッチャー	11
	エルゴストレッチャー S / メッシュ	11

ストレッチャー	パートナー企業製品：オカダ医材（株）	ボディー・キーパー / マジック・ギブス	13
	パートナー企業製品：（株）いきがい	マルチボード SMR / 万能三角巾	14
	緊急搬送器具（新生児）		

赤ちゃん搬送具	ベビーキャリア・おくるみ	15
	ベビーキャリア・トリプル	16
	赤ちゃん用ディスボーズブル保温シート	16
	気道保護肩パッド（枕）	16

災害用資器材（ベッド・他）

快適簡易ベッド	キャビーハコベルベッド / 点滴棒（オプション）	17
	キャビーマリーベッド / 多目的点滴棒（オプション）	18
インフレーターマット	キャビーレスト	18
パーテーション	パーテーション	18
寝袋	FSHG 寝袋 マミー型 / FSHG 寝袋 封筒型	18
パートナー企業製品：（株）新井製作所	ネスティ / Amilite	19
パートナー企業製品：オンウェー（株）	イージーハイターブル / ディレクターチェア	20

災害用資器材（テント）

ゲートキーパー	1935 シェルターシステム	23
	20 シェルターシステム / 16 シェルターシステム	24
セット商品	除染シャワーテントシステム	25
パートナー企業製品：（株）カンバーランド・ジャパン	トレーラーハウス：カタリナ	27

災害支援チームウェア

災害支援チームウェア	アクティブジャケット	29
	アクティブパンツ	29
	高視認性防水防寒ブルゾン	30
	高視認性防水防寒パンツ	30
ワッペン / 識別名札	ワッペン各種 / 識別名札	31
	CAP ヘルメット（眼球保護シールド付き）	32
ウェアその他	オールシーズンベスト	32
	帽子・安全靴	32
	ウエストバッグ	33
	キャリアバッグ	33
災害支援チーム携行バッグ	3WAY ビジネスバッグ	33
	マルチポケット バックパック	33
	マルチポケット バックパック	33
セット商品	災害支援受け入れ資器材キット	34
パーテーション	一人用パーテーション	34
インフレーターマット	キャビーレスト	34

感染症対策製品

飛沫拡散防止対策カバー	ポップアップ・アイソレーター	35
	ユーリーチェアー	36
	Novair700	36
陰圧空気清浄機	HAP-500	36
	Novair1000	36
	Novair2000	36
透明特殊フィルム納体袋	CAP ボディーバッグセット	36

●製品の仕様・性能および販売価格は、予告なく変更になる場合があります。 ●カテゴリー掲載の写真・画像はイメージです。実物とは若干異なりますのでご了承ください。 ●掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●本カタログから許可なく転記、複写することを禁じます。

緊急搬送器具

エアーストレッチャーは
看護師さんのアイデアから
誕生しました。

Airstretcher.



説明動画

エアーストレッチャー® レイズ・ローバル

病院からの要望により開発された
階段上り下り搬送が可能な
タイプです。

レイズグリップ



1人搬送



2人搬送



階段搬送(下り)



階段搬送(上り)

- レイズグリップを使って下から上への階段搬送が可能です。
- 傷病者をワンタッチカバー(ラップ)で包み込み安全ベルトで固定して搬送します。
- 自吸式のエアバルブを開けると約60秒で空気は自動的に入り搬送可能になります。
- 底部には特殊ポリエチレン(PE)板を装着、散乱物や凹凸の衝撃から傷病者を守ります。

仕様

サイズ : 使用時 80(幅)×190(長さ)×5.5(厚さ)cm 収納時 φ30×80cm
重さ : 約7kg(本体重量)
耐荷重 : 140kg
加工 : 底面 ローバル加工 特殊ポリエチレン(PE)板付
持ち手 : レイズグリップ2、ループベルト1、ハンドベルト8
患者固定具 : ワンタッチカバー1、安全ベルト3
付属品 : キャリーバッグ、オープナーベルト

品名 エアーストレッチャー® レイズ・ローバル

品番 CYN-11R



レイズグリップ



自吸式エアーマット



底部特殊ポリエチレン(PE)板

エアーストレッチャーは、様々な職場・施設での
階段搬送・避難に活用されています。



集合住宅



大学



宿泊施設



救急現場



病院



高層ビル



学校



工場



オフィス



老健

●水に浮く



(写真提供:長野市営プール) 使用製品:プロ/型式CYG-060)

●搬送後寝具として雪の中でも

石畳・石階段待機 使用製品:ラップ・ローバル/型式CYR-04T
雪上での待機 使用製品:プロ・ローバル/型式CYG-06T

エアーストレッチャー® ラップ・ローバル

傷病者を少ない人数で搬送可能
階段下り搬送ができるベーシック
モデルです。

- 傷病者をワンタッチカバー（ラップ）で包み込み安全ベルトで固定して搬送します。
- 自吸式のエアバルブを開けると約60秒で空気は自動的に入り搬送可能になります。
- 底部には特殊ポリエチレン（PE）板を装着、散乱物や凹凸の衝撃から傷病者を守ります。



1人搬送 2人搬送 階段搬送（下り）



ワンタッチカバー（ラップ） 自吸式エアーマット 底部特殊ポリエチレン（PE）板

仕様

サイズ : 使用時80(幅)×190(長さ)×5.5(厚さ)cm 収納時φ30×80cm
重さ : 約7kg(本体重量)
耐荷重 : 140kg
加工 : 底面 ローバル加工 特殊ポリエチレン（PE）板付
持ち手 : ループベルト1、ハンドベルト8
患者固定具 : ワンタッチカバー1、安全ベルト3
付属品 : キャリーバッグ、オブナーベルト

品名 エアーストレッチャー® ラップ・ローバル

品番 CYR-04T

エアーストレッチャー® スリムモデル

幅75cm程の狭い階段、通路での搬送に対応した軽量なスリムモデルです。

幅 63cmのスリムモデル



1人搬送 2人搬送 階段搬送（下り） 階段搬送（上り）

レイズ	●	●	●	●
ラップ	●	●	●	—

- レイズ・ローバルと同様の機能を持つ幅63cmのスリムモデルです。



レイズ・ローバル・スリム

- ラップ・ローバルと同様の機能を持つ幅63cmのスリムモデルです。



ラップ・ローバル・スリム

仕様

サイズ : 使用時63(幅)×190(長さ)×5.5(厚さ)cm 収納時φ30×63cm
重さ : 約5.5kg(本体重量)
耐荷重 : 140kg
加工 : 底面 ローバル加工 特殊ポリエチレン（PE）板付
持ち手 : レイズグリップ2、ループベルト1、ハンドベルト8
患者固定具 : ワンタッチカバー1、安全ベルト4
付属品 : キャリーバッグ、オブナーベルト
※レイズ・ローバル・スリムのみ

品名 エアーストレッチャー® レイズ・ローバル・スリム

品番 CYN-11RS

品名 エアーストレッチャー® ラップ・ローバル・スリム

品番 CYR-04TS

※エアーストレッチャーの日米特許・実用新案はエアーストレッチャー株式会社が保有しています。

エアーストレッチャー® FDM シリーズ

多くの救急救助隊員の方のご意見を
参考にして開発された隊員向けの
エアーストレッチャーです。

- 民家の狭い通路や狭い階段の搬送に適しています。
- 搬送者の持ち手になるラバーグリップが左右それぞれ4か所あります。
- 可動式安全ベルトで傷病者を固定して搬送します。
- 血液の色等が判定しやすいメディカルグリーンです。
- ターボリン布を使用しており水洗いやアルコール消毒が可能。



階段搬送 踊り場 ストレッチャーに乗せる

品名 エアーストレッチャー® FDMエアー

品番 CYF-DM2

品名 エアーストレッチャー® FDMエアー・ローバル

品番 CYF-DM3

仕様

サイズ : 使用時 75(幅)×190(長さ)×7.5(厚さ)cm 収納時 φ30×75cm
重さ : FDMエアー約6.7kg(本体重量) FDMエアー・ローバル約8kg(本体重量)
耐荷重 : 140kg
持ち手 : ループベルト1、ハンドベルト8
付属品 : 可動式安全ベルト3、フットカバー1、ローバル固定ベルト3、ローバル板1※
※FDMエアー・ローバルのみ



FDMエアー



FDMエアー・ローバル（ローバル板はワンタッチで着脱が可能）



ラバーグリップ



可動式安全ベルト（3ヶ所）

エアーストレッチャー® メッシュ・ローバル

水に浮き、浮き具として
使用できるストレッチャーです。

- 水上から引き上げ、そのまま搬送できます。
- 砂浜、アスファルト路上でもそのまま使用できます。
- レイズグリップを使って階段の上り搬送が可能です。
- 外生地は、ストレッチャー内に水が溜まらないメッシュ素材を使用。



識別色安全ベルトをクロス固定



水上搬送 水際搬送 スライド搬送

写真提供：沖縄県・美らSUNビーチ、海難訓練

仕様

サイズ : 使用時 80(幅)×190(長さ)×5.5(厚さ)cm 収納時φ30×80cm
重さ : 約7.5kg(本体重量)
耐荷重 : 140kg
加工 : 底面ローバル加工特殊ポリエチレン（PE）板付
持ち手 : レイズグリップ2、ループベルト1、ハンドベルト6
患者固定具 : 識別色安全ベルト4
付属品 : キャリーカバー、オブナーベルト

品名 エアーストレッチャー® メッシュ・ローバル

品番 CYM-12R

エアーストレッチャー®

※エアーストレッチャー®の日米特許・実用新案はエアーストレッチャー株式会社が保有しています。

エアーストレッチャー® 比較表

	幅			長さ	厚さ	階段搬送 (下り)	階段搬送 (上り)	エアーマット	ラップ	フットカバー	ローバル板	安全ベルト	保護布 (ポリエステル)
	生地												
 レイズ・ローバル	80	190	5.5	●	●	●	●	—	●	固定(3)	—		
	デニムワイド(80)												
 ラップ・ローバル	80	190	5.5	●	—	●	●	—	●	固定(3)	—		
	デニムワイド(80)												
 レイズ・ローバル・スリム	63	190	5.5	●	●	●	●	—	●	固定(4)	—		
	デニムスリム(60)												
 ラップ・ローバル・スリム	63	190	5.5	●	—	●	●	—	●	固定(4)	—		
	デニムスリム(60)												
 メッシュ・ローバル	80	190	5.5	●	●	●	—	—	●	固定(4)	—		
	メッシュワイド(80)												
 FDMエア	75	190	7.5	●	—	●	—	●	—	可動(3)	●		
	ターポリンスリム(60)												
 FDMエア・ローバル	75	190	7.5	●	オプション	●	—	●	●	可動(3)	●		
	ターポリンスリム(60)												

三連結担架棒(収納袋付)

オプション

エアーストレッチャーの左右のループベルトガイドに通すことで棒担架として使えます。



エアーストレッチャーループベルト部差し込み例

仕様

サイズ: 使用時 約φ4×220 (長さ) cm
収納時 約φ12×90 (長さ) cm
重 ざ: 約4kg



マリーベッドに差し込み担架とした例

品名

三連結担架棒(収納袋付)

品番 PSS-023

意匠登録取得

設置台(床置型・カバー付き)

オプション

普段から設置場所を知らせることが緊急時の備えにつながります。

■仕様 ※お客様で組み立てが必要となります。
設置台: 約41 (幅) ×100 (高さ) ×35 (奥行) cm
カバー: 約46 (幅) ×99 (高さ) ×39 (奥行) cm
重 ざ: 約7.4kg
付属品: 簡易使用説明パネル

■品名 設置台(床置型・カバー付き)

品番 AOR-002



500L用 酸素ボンベリュック

オプション

いざという時に両手が使えるリュックタイプです。

仕様

本体: 約24 (幅) ×62 (高さ) ×18 (マチ) cm
重量: 約850g
材質: 本体/ナイロン100%

■品名 酸素ボンベリュック

品番 SBZ-001



オプション / FixPro for LUCAS® 3 / CAPディスポストレッチャー・シート

△ 医療従事者向けの医療機器です

オプション

アンブ パーフィットエース

搬送時に患者を固定するためのネックカラー。素早く、確実な固定が可能です。

- X線を透過。MRI/CTでも使用可能です。
- 頑丈な高密度プラスチック製です。
- パッドは汚れにくい非吸収性素材です。
- ワンピース方式で組み立てが簡単、フラットなので収納にも場所を取りません。

仕様

パーフィットエース寸法 : 長56×幅18×厚1.5 cm
一般 製造販売届出番号: 11B1X00001000014
ミニパーフィットエース寸法: 長44×幅18×厚1.5 cm
一般 製造販売届出番号: 11B1X00001000013

■品名 アンブ パーフィットエース

成人用 品番 IMI-055

ミニ小児用 品番 IMI-065

※最小発注単位 5点

メーカー商品コード: 10209055、10209065



パーフィットエース (成人用)

フラット収納

ミニパーフィットエース (小児用)

FixPro for LUCAS® 3

自動心臓マッサージ器固定補助ベルトです。

- 傾斜搬送での自動心臓マッサージ器のズレを抑制する補助ベルトです。
- 20 秒の取り付け時間で自動心臓マッサージ器の安定性を向上できます。



■品名 FixPro for LUCAS3

品番 FIP-001

- 撮影のために着衣しております。LUCAS®3 の正しい使用方法に関しては、LUCAS®3 付属の取扱説明書をご確認ください。
- 本製品は「LUCAS®3」「エアーストレッチャー・FDM・エア・ローバル」専用設計です。



ベルトの色分けにより
取り付け作業で迷いません。

LUCAS®3専用キャリング
バッグと一緒に収納可能です。

一般住宅の平均階段傾斜
30°~37°を超える
45°でも安定した
稼働をサポート



出典: 「CCFを維持するための自動心臓マッサージ器固定ベルトの検討」
広島国際大学 保健医療学部 救急救命学科

CAPディスポストレッチャー・シート

移動・搬送が一枚のシートで可能になる使い捨て担架です。

- 省スペースで災害備蓄に適しています。
- 保管目安は5年です。

仕様

サイズ: 使用時 82×198cm
収納時 約A4×厚さ3cm
重 ざ: 約200g
材 質: 綿・ポリエチレン
安全荷重: 100kg
耐 荷 重: 140kg


■品名 CAPディスポストレッチャー・シート

品番 SSK-101

※最小発注単位: 10 枚



天然コットン/使用で保温効果
も期待できます。

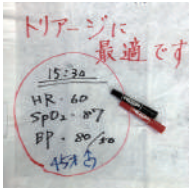

シートに直接文字を書き
込めます。



アジャストレッチャー®

ストレッチャーの長さを調整できる
ターポリン製ストレッチャーです。


- 可変式フットカバーで長さを3段階に調整でき身長差に応じた搬送が可能です。
- 脚部に「おまとめグリップ」が付属。
- 人間工学的知見に基づいた力の入れやすい持ち手配置（頭部・脚部）
- 内蔵マットがストレッチャーへの移乗時の傷病者の負担を軽減。



可変式フットカバー



おまとめグリップ

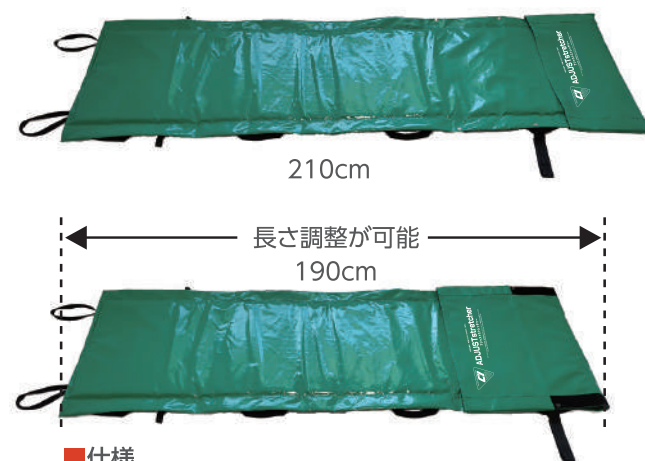8個の持ち手と
4個のハンドベルト

■仕様

サイズ：使用時 約60(幅)×190/210/240(長さ)×2.0(厚さ)cm
 収納時 約60(幅)×60(長さ)×10(厚さ)cm (三つ折り)
 重さ：約2.9kg
 耐荷重：140kg
 材質：本体(ターポリン生地) 底面保護布(ポリエステル)
 クッション材(ウレタンマット)
 グリップ(ビニールチューブ黒ベルト巻 6箇所付)
 特長：可変式フットカバー
 オプション：可動式安全ベルト、ショルダーベルト(カラビナ付)、収納袋

■品名 アジャストレッチャー®

品番 ADJ-001

特許・意匠登録取得

ザイストレッチャー® シリーズ

座位での搬送に特化した専用担架です。

- 血液・汚物等をふき取りやすいターポリン製です。
- 肩・太もも部分に内蔵マットで痛みを軽減します。
- メッシュは水難エリア、お風呂場や浴槽内の患者救護、熱中症者救助に活躍します。



コンパクト収納・持ち運べるターポリン製の収納袋付き

■品名 ザイストレッチャー® (メッシュ)

品番 ZAI-M01



メッシュ

ターポリン

■仕様

サイズ：使用時 約50(幅)×48(高)×3.0(厚さ)cm
 座面 約42(幅)×48(長さ)cm
 収納時 約23(幅)×51(長さ)×6.5(厚さ)cm
 重さ：(本体重量)メッシュ約600g ターポリン約650g
 耐荷重：約140kg
 材質：生地:ターポリン メッシュ:ナイロンメッシュ
 クッション材:ウレタンマット 持ち手:ナイロン
 付属品：収納袋(ターポリン)



■品名 ザイストレッチャー® (ターポリン)

品番 ZAI-T01

固定板ポケット加工

オプション マルチボード SMRなどを差し込むことで
より安定した搬送が可能です。

※気道保護具・頸椎保護具・頭部固定具等を使用する時は、救急救命士又は医師の判断の元に行ってください。

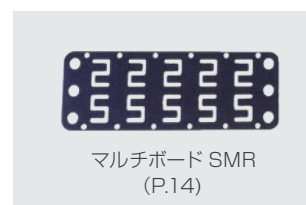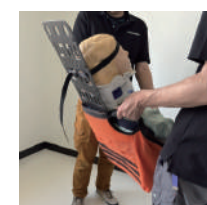マルチボード SMR
(P.14)

マルチボードを2枚使用した搬送

ポケット部分は
ターポリン製

■品名 固定板ポケット加工

品番 ZAI-OP1

エルゴストレッチャー® S シリーズ

耐久性能を向上させた新モデル

人間工学的知見に基づいた構造で隊員の
身体負担を軽減でききます。



使用動画

- 18個の持ち手で負担の少ない搬送姿勢が可能。
- 自然な手首角度で保持できる傾斜した持ち手。
- 水はけを良くするメッシュタイプはお風呂場や熱中症対策で効果を発揮。



力の入れやすい配置



握りやすい



18個の持ち手

■品名 エルゴストレッチャー® S

品番 ERG-003



〈収納時〉

■仕様

サイズ：使用時 約70(幅)×185(長さ)cm
 収納時 約70(幅)×20(長さ)×13(厚み)cm
 重さ：約2.0kg メッシュ2.5kg
 耐荷重：約90kg ※持ち手4か所で持ち上げた場合
 材質：本体:ターポリン、塩ビ(持ち手芯材)、CSM(持ち手補強材・メッシュ部)
 付属品：固定ベルト2

■品名 エルゴストレッチャー® S・メッシュ

品番 ERG-004

意匠登録取得

用途によって選べるエアーストレッチャー®搬送具

階段を滑らせるように搬送
持ち上げないノーリフト担架



負担軽減

エアーマット

水に浮く

エアーストレッチャー®シリーズ

ターポリン製
持ち上げ式担架



多彩な特徴

中価格帯

コンパクト

アジャストレッチャー®
エルゴストレッチャー®

座った姿勢
持ち上げ式座位担架



軽

量

安

価

格

帯

コンパクト

ザイストレッチャー®

ボディー・キーパー

一般 製造販売届出番号 13B2X00361000BK1

頭部から足先まで包み込む安心感で、
体位固定と移動時の負担を軽減

- 柔軟性に優れた合成ゴムシートを使用
- 全身を包めるサイズ設計で術中の体位の固定や術後の姿勢保持などに最適
- 移動時には振動・不快感を軽減

合成ゴム（クロソルホン化ポリエチレン）製シートでできた本体に、合成ゴム（クロロプレン）製の排気口を取り付けたものです。内部に直径1～4mmの発泡したポリスチレンビーズを入れてあります。



安全な固定と、やさしい搬送を両立

- 全身固定が可能な担架として使用できる
- 院内移動時の振動による苦痛を軽減
- さまざまな搬送シーンに対応できる汎用性

OKA-001 は本体周囲の縁に穴をあけハトメ金具を付けて、ナイロン製ロープを通し、ロープに塩ビ製のパイプを通したものです。



OKA-301

仕様

OKA-101 寸法：1,900×750mm 凹部分：200×200mm
OKA-202 寸法：1,900×750mm 頭部凸部分：250×610mm
OKA-301 寸法：1,900×750mm
搬送固定用 OKA-001 寸法：1,900×750mm
素材：合成ゴムシート
付属品：吸引ノズル付ホース、綿カバー 1枚※、ベルト 3本※
※搬送固定用 OKA-001 には付属しません。

品名 ボディー・キーパー ※受注生産品

ボディー・キーパー凹	品番 OKA-101
ボディー・キーパー凸	品番 OKA-201
ボディー・キーパー	品番 OKA-301
ボディー・キーパー（搬送固定用）	品番 OKA-001
メーカー型番：MW-101、EW-201、ZW-301、ZTR-1	

マジック・ギプス

一般 製造販売届出番号 13B2X00361000GP1

部位に合わせて選べる、三種の固定

- 柔軟性と密着性に優れた構造
- 発泡ビーズによる安定した固定力
- ビーズの偏りを防ぐ仕切り構造

柔軟な合成樹脂シートでできた袋に排気口を設け、内部に直径1mm～3mmの発泡したポリスチレンのビーズを封入したものです。内部には発泡ビーズの偏りを防ぐ仕切りを設定してあります。



下肢の固定に適した形状。その他腰部、肋骨、頸椎部の固定にも使用可能です。



上肢の固定に適した形状。その他小児穩定関節、頸椎、動物病院でも使用可能です。



頭部を含めた上半身の固定を目的にした形状。その他腰部または小児の全身の固定にも使用可能です。



マジックギプス 3種（下肢用、上肢用、頭部用）
付属品：真空ポンプ 1台 専用バッグ 1個

仕様

OKA-012 寸法：470×900×35mm
OKA-013 寸法：280×530×23mm
OKA-014 寸法：700×880×45mm
素素材：合成樹脂シート
付属品：ノズル付き吸引ホース、綿カバー 2枚、ベルト 2本※
※OKA-014 はベルト 3本

品名 マジック・ギプス

下肢用	品番 OKA-012	上肢用	品番 OKA-013
頭部用	品番 OKA-014		
メーカー型番：E-12、E-13、E-14			

品名 マジック・ギプスセット（災害・備蓄用）

品番 OKA-234	メーカー製品番号：11761211
------------	-------------------



オカダ医材株式会社は、医療機器メーカーとして医療現場で使用される医療材料・医療機器の製造・販売を行っています。陰圧式固定具をはじめ、災害時や緊急対応の現場でも使用可能な製品を取り扱い、限られた環境下でも確実な処置を支援。平時から非常時まで医療の現場を支えています。

マルチボードSMR

乳児から高齢者まで、
世界で最も小さく、薄く、軽い、多機能ボード

- 乳児であれば1枚、身長2mの成人男性では3枚で、大腿骨骨折時などの骨折部位や背骨の安定化・牽引が可能です。
- 連結に工具は必要ありません。三角巾、ベルト、ロープなどで連結できます。
- 装着したままレントゲン撮影が可能です。



1枚で大人の頭部を堅固に固定でき、頭部が傾いた状態でも固定できます。



△ 頸椎・脊椎・骨折部位等を保護する固定具を使用する場合は、医師の指示に従い装着してください。



マルチボード連結の様子

仕様

サイズ：590×220×3mm
重量：500g
素材：CFRP：Carbon Fiber Reinforced Plastics
炭素繊維強化プラスチック
耐荷重：80kg（マルチボード1枚）
連結使用の場合は接続するベルトやカラビナの強度が影響します。
※ベルト・固定具は付属しません。

品名 マルチボードSMR

1枚	品番 IKG-001	2枚	品番 IKG-002
3枚	品番 IKG-003		特許出願中

ガーゼポケット付 万能三角巾

発災時の救急処置から復興時の健康管理まで、
アイデア次第で 100 通り以上に使える万能三角巾

- 頂点付近に止血機能付包帯、圧迫止血用沈子（ちんし）、アイシールド、懐炉、冷却パック等を三角巾に収納して身体へと固定できるポケットを備えています。
- 救命止血帯では制御できない身体部位からの出血に対して、直接圧迫止血、止血点圧迫止血を効果的に行えます。


△ 傷口・患部には医療用ガーゼを当ててから使用してください。

仕様

白色 サイズ：1650×1170mm
素材：綿 重量：約 60g
OD 色 サイズ：1650×1170mm
素材：麻 重量：約 106g
乾燥時は風通しが良く、湿気があると繊維間が閉まり水分を通しにくくなる麻繊維製



株式会社いきがい
あらゆる危険から生命と財産を守り、あらゆる救命ができる体験型教育を世界中に提供することで豊かな人生の基盤を築くための事業をしています。
感染症、突然の心停止からテロによる致命傷まで、防火・防災・防犯、あらゆる危機に備えられるよう、変化の先に対応できる考え方の普及とそれに基づいた製品開発に努めています。

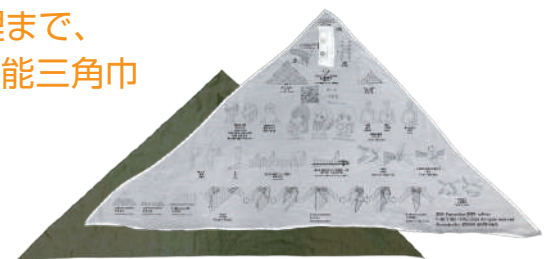

- 白・OD どちらも全身の被覆が全面にプリントされています。OD には有毒化学剤に曝露した際の推定法、通報方法、健康管理の基礎情報もプリントされています。
- 止血・被覆・保護・固定・牽引の主要な使用法において、最も効果が高いとされる国際標準サイズ 1650×1170mm です。

品名 万能三角巾

白色	品番 IKG-101	OD 色	品番 IKG-102
			特許出願中

緊急搬送器具(新生児)

生まれたばかりの大切な命
真っ先に守りたいと
私たちは考えました。

おくるみ



説明動画

トリプル



説明動画

ベビーキャリア™・おくるみ®

「お母さんと一緒に」をコンセプトに看護師の方々と共同開発しました。

1人用の
赤ちゃん搬送具



お母さんの胸部に固定することにより、
両手が使えます。また、その保温効果で
体温管理ができます。



橙

緑

黄

- 首の不安定な赤ちゃんの安全を考慮して底面に特殊プラスチックを内蔵しています。
- 内側はおくるみ状で柔らかなキルト材を採用しています。
- 搬送中お母さんから赤ちゃんの表情が見える設計です。
- 肩パットを採用して、肩に負担が少ない設計です。



平らな場所で広げる 赤ちゃんを乗せる ベルクロで固定 肩に掛けて運ぶ

Mサイズ



モデル人形47cm 71cm

Lサイズ



モデル人形47cm 81cm

仕様

Mサイズ：使用時 対角約71×71×1(厚さ)cm 収納時 約31×22×5(厚さ)cm 重さ 約600g
Lサイズ：使用時 対角約81×81×1(厚さ)cm 収納時 約33×25×7(厚さ)cm 重さ 約900g
加工：弱撥水加工
素材：外側 ポリエステル100% 内側 綿100% キルティング加工
付属品：キャリアバッグ

品名 ベビーキャリア™・おくるみ®

Mサイズ	橙 品番 OKM-001	緑 品番 OKM-003	黄 品番 OKM-005
Lサイズ	橙 品番 OKM-002	緑 品番 OKM-004	黄 品番 OKM-006

特許・意匠登録取得

ベビーキャリア™・トリプル

2～3人用の
赤ちゃん搬送具

いざという時、両手が使え、赤ちゃん2～3人を一緒に搬送できます。



足元を確認しながら階段搬送ができます。

- コーナーのバックルをセットするだけです。
- 側面、底部にクッションが入っており搬送時の衝撃を緩和します。
- 上部カバーの窓から赤ちゃんの様子を確認できます。
- 肩や腰への負担を軽減する設計になっています。



キャリアボックスの組立て 赤ちゃんを入れる 保護カバーをセット ウエストベルトでしっかり固定

仕様

サイズ：使用時 約48×56×23(高さ)cm 収納時 約52×64×10(厚さ)cm
重さ：約2.7kg
加工：防水加工
素材：ポリエステル・ナイロン
緩衝材：ウレタン
ベルト：Y字型サスペンダーベルト 1本 ウエストベルト 1本
付属品：キャリアバッグ

品名 ベビーキャリア™・トリプル 品番 NMB-02C

赤ちゃん用ディスポーザブル保温シート キャピウォーム®

赤ちゃんにやさしい肌触りの良い
ディスポーザブル保温シートです。

- 内側は肌に優しい天然 Cotton の三層構造です。

品名 キャピウォーム® (6枚入)

70×70cm 品番 CAW-070 60×60cm 品番 CAW-060 40×40cm 品番 CAW-040



気道保護肩パット(枕) キャピーピロー®

搬送時、赤ちゃんの気道を保護する
目的で開発された枕です。

- 肌にやさしい天然 Cotton を使用しています。

仕様

サイズ：収納時 約21cm×29cm×厚さ4.5cm
使用時 約21cm×21cm×厚さ4.5cm
重さ：約150g
素材：綿100%



品名 キャピーピロー® (3個セット)

黄色 品番 CPY-001 緑色 品番 CPY-002

特許・意匠登録取得

巻き部分には特殊プラスチックが
内蔵されています。



災害用資器材 (ベッド・他)

災害用テント内や緊急避難所で使用する
ベッドやパーテーションを
ご提供いたします。



ワンタッチメッシュベッド キャピーマリーハコベル®ベッド

寝たまま運べるから、急なレイアウト変更 処置スペースの確保 緊急搬送にも※

- 数秒で完了!! 広げるだけで設置できます。幅70cmの幅広モデル。
- 2種のメッシュ生地で沈み込みを抑え、NBC災害時の洗浄台として使用可能です。
- 一般的なX字構造の骨組みより強いトラス構造の骨組みを採用しています。

※階段搬送や中長距離の搬送には適しておりません。



■仕様
サイズ：展開時 約70(幅)x188(奥行)x50(高さ)cm
収納時 約24(幅)x105(奥行)x17(高さ)cm
重さ：約6.5kg
持ち手：可動式ハンドグリップ4(2本)
耐荷重：120kg
材質：生地 高強度メッシュ フレーム スチール
付属品：収納袋



■品名 キャピーマリーハコベル®ベッド 品番 EZB-002

点滴棒

オプション

点滴棒を取り付け災害現場での
処置用ベッドとしても使用できます。




■品名 点滴棒
両側フック 品番 MBA-008 片側フック 品番 MBA-007
HBセフティーグリップ(点滴棒固定具) 品番 EZB-100

※点滴棒の取付にセフティーグリップが必要です。

快適簡易ベッド キャピーマリーベッド

非常時だけでなく、平常時から使える快適な簡易ベッドです。

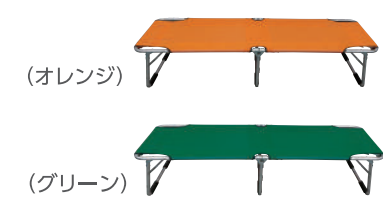

- 足折れ防止ストッパーが付いています。
- 床を傷めない保護グリップ付、不快音も軽減します。

- 継ぎ目の無いメッシュ状の特殊繊維を採用しています。
- 折りたたみ式、片手で運べる軽量5kg

■仕様

サイズ：使用時 約60(幅)x178(奥行)x33(高さ)cm
収納時 約60(幅)x89(奥行)x14(高さ)cm
重さ：約5kg(本体重量) 耐荷重：180kg
材質：ナイロン糸織り込み特殊メッシュ布、フレームはアルミ軽合金、ラバーストッパー付

■品名 キャピーマリーベッド

グリーン	品番 MBI-8MG
オレンジ	品番 MBI-8MO

多目的点滴棒

オプション

キャピーマリーベッドに点滴棒を取り付け処置用ベッドとしても使用できます。



■品名 多目的点滴棒

両側フック	品番 MBA-008	片側フック	品番 MBA-007
セフティーグリップ(点滴棒固定具)	品番 MBA-010		

※多目的点滴棒の取付にセフティーグリップが必要です。

キャピーマリーレスト

持ち運び便利なエアーマット

- 自吸式でバルブをひねれば膨らみます。
- エアーストレッシャーシリーズに使用されているエアーマットです。
- 災害時の強力なサポートアイテム。
- 収納袋には対空信号をプリント。

■仕様

サイズ：展開時 約60 x 180 x 5cm
収納時 約20 x 高60cm
重量：約1.9kg
使用：自吸式エアバルブ、内部撥水加工
付属品：収納袋(対空信号プリント)

■品名 キャピーマリーレスト 品番 RCY-060

パーテーション

避難所でもプライバシー
を守ります。

標準付属品

- 収納袋
- 室内敷きレジャーマット



■仕様

サイズ：使用時(TAS-150) 幅200×奥200×高150cm
使用時(TAS-180) 幅200×奥200×高180cm
収納時(共通) φ80×厚10cm
重さ：約5.5kg(TAS-150) 6.0kg(TAS-180)

■品名 パーテーション

高さ150cm	品番 TAS-150	高さ180cm	品番 TAS-180
---------	------------	---------	------------

FSHG 寝袋 汗をかいても洗濯可能

- オールシーズン用/耐寒-15℃/マミー型

※収納袋はどちらのカラーを選んでもブラックとなります



■仕様

サイズ：72.5L x 190cm
素材：中空ホローファイバー
防水：簡易防水
防寒：-15℃
※寒冷地ではマットや防寒対策をしてご使用ください

■品名 FSHG 寝袋 マミー型

ブラック	品番 FSJ-008	ネイビー	品番 FSJ-009
------	------------	------	------------

- 3シーズン用/快適睡眠温度0℃～10℃/封筒型
- 開いて使用可能



■仕様

サイズ：150L x 190cm
素材：中空ホローファイバー
防水：簡易防水
快適睡眠：0℃～10℃
※寒冷地ではマットや防寒対策をしてご使用ください

■品名 FSHG 寝袋 封筒型

ブラック	品番 FSJ-006	グレー	品番 FSJ-007
------	------------	-----	------------

ネスティ

重ねられる点滴スタンド

- ポンプ搭載も可能な安定感抜群の6脚ベースを採用！
- 使用しない時は重ねて保管できる省スペースモデル。
- 大容量輸液やボトル交換時に便利なサブフックつき。



6脚スタンドで抜群の安定感



U字フック



S字フック

折りたたみ可能なサブフック2コを標準装備
歩行時はフックが回転せずに安定します。
フックを少し持ち上げると回転が可能で、ボトル交換が容易です。

■仕様

サイズ：高さ 1,250mm ~ 2,100mm ベース直径 φ500mm
φ60mm 双輪ウレタンキャスター
重量：約 5.0kg
素材：(支柱) ステンレス (脚部) アルミ + 樹脂カバー + クッションバンパー

■品名 ネスティ

U字グリーン	品番 ARI-902G	S字グリーン	品番 ARI-902GS
U字イエロー	品番 ARI-912G	S字イエロー	品番 ARI-912GS
U字ピンク	品番 ARI-922G	S字ピンク	品番 ARI-922GS
U字ブルー	品番 ARI-932G	S字ブルー	品番 ARI-932GS
U字オレンジ	品番 ARI-942G	S字オレンジ	品番 ARI-942GS
U字レッド	品番 ARI-952G	S字レッド	品番 ARI-952GS

「安心・簡単・便利」をカタチに

オプション

※オプションをご希望の場合はお問合せ下さい



■品名 ケーブルホルダー



マルチフック



マルチトレイ



ポンベホルダー

アミライト

Amilite 小型 LED 照明灯

- 長寿命、コンパクトサイズの LED 照明灯です。
- 便利なプッシュボタンによる 10 段階の角度調整つきです。



■仕様

照度：約 6,000Lux(800mm において)
電源：AC100 ~ 240V 50/60Hz
サイズ：W460×D460×H800 ~ 1,600mm
重量：約 6.0kg
消費電力：約 3W

■品名 Amilite7

品番 ARI-4101



■仕様

照度：約 16,000Lux(800mm において)
電源：AC100 ~ 240V 50/60Hz
サイズ：W460×D460×H800 ~ 1,600mm
重量：約 6.7kg
消費電力：約 6W

■品名 Amilite19

品番 ARI-4019



自由に動くヘッド



株式会社新井製作所は 1948 年の創業以来、看護・病棟用機器を中心に院内感染・医療安全・看護業務改善に役立つ医療機器を開発・製造・販売しております。
各種 PPE ホルダーや輸液架台等トロリーの別注品 (特注) 製作をはじめ、医療現場に求めらるものを知恵を絞ってカタチにしていける会社です。

イージーハイテーブル

多用途に使えるアルミ2段式テーブル

- 全体がアルミ合金製な為、汚れても水拭きできて、お手入れ簡単。
- 丈夫なアルマイト加工で、いつまでも格好良く使えます。
- 立ち作業のしやすい上天板の高さは 86cm。



■仕様

使用時：W100xD45xH86cm (上段) H48cm (下段)
収納時：W102xD20xH20cm
重量：約 5.6kg
耐荷重：20kg (全体)
素材：フレーム / アルミ合金・アルマイト
天板 / アルミ合金・アルマイト
付属品：収納袋付き

■品名 イージーハイテーブル

品番 ONW-1045

※最小発注単位 2 台

ディレクターチェア

長時間座っても疲れを感じにくいチェア

- 座面にはポリエステル 800 デニールを採用。
- お洒落な菱形模様。
- ズレにくい改良された手すりカバー。
- 安心できる丈夫なフレーム構造。
- フレームはアルミ合金製で軽量。



レッド

グリーン

グレー

説明動画

収納はフレームを踏みながら座面を持ち上げると収納できます。
※テーブルは付属しません



ロンバス

■仕様

使用時：約 W62xD55xH79cm
収納時：約 W15xD55xH79cm
座面高：約 42cm 肘掛け高 62cm
重量：2.9kg ●耐荷重：100kg
素材：フレーム / アルミ合金・アルマイト
座面 / ポリエステル 800 デニール
肘掛 / 発泡ウレタン・ポリエステルカバー

■品名 ディレクターチェア

レッド	品番 ONW-N65R	グリーン	品番 ONW-N65G
グレー	品番 ONW-N65Y	ロンバス	品番 ONW-N65RN

※最小発注単位 4 脚



オンウェー株式会社は、アルミ製折りたたみ椅子 (チェア) とテーブルを主力とするアウトドアファニチャー・メーカーです。「創造、そして行動」を指針に、オリジナリティのある製品開発を行っています。多くのデザイン賞 (グッドデザイン賞等) を受賞した実績があり、独自のデザイン性と付加価値の高い製品を展開しています。洗練されたデザインと機能性を両立させた、日本発のアウトドア家具ブランドとしての地位を確立しています。

野外救護所普及推進プロジェクトを発足

災害時における持続可能な医療環境を被災地に提供することで、健やかに暮らせる社会の実現を目指し「野外救護所普及推進プロジェクト」を開始いたしました。

災害時の野外救護所として、ウェスタンシェルターとトレーラーハウスを連結、国内初の野外診療所・野外薬局・医療物資供給所を設置し、救援・救助活動に出動した DMAT 隊員をはじめとする各組織団体隊員の環境整備を行うプロジェクトです。

目指すべき形について

災害発生直後の超急性期における日本 DMAT（災害時派遣医療チーム）の迅速な医療支援を起点とし、その後のさまざまな医療支援団体の活動を経て、復興期の地域医療再興に至るまで一貫して活用可能な医療拠点を構築することが、持続可能な医療提供の実現につながると考えています。

さらに、この医療拠点は、日本 DMAT 隊員をはじめ各医療支援団体の隊員たちが健康かつ安全に活動を持続けられるよう、適切な健康管理と環境整備を行い、過酷で劣悪な環境になることを防ぐ役割も担う必要があります。


地域医療再興後の用途について

地域医療の再興後、トレーラーハウスは仮設住宅や商業施設のほか、コミュニティ拠点、防災教育施設など、多様な用途で活用していくことで、サステナブルに地域社会の復興を後押しできると考えております。

日本国内には以下の通りの災害派遣チームなどがあります。

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ・ DMAT(災害派遣医療チーム) | ・ 日本赤十字社 (救護班) |
| ・ JMAT(日本医師会災害医療チーム) | ・ DPAT(災害派遣精神医療チーム) |
| ・ DHEAT(災害時健康危機管理支援チーム) | ・ JRAT(災害リハビリテーション支援チーム) |
| ・ DWAT(災害派遣福祉チーム) | ・ JDA-DAT(日本栄養士会災害支援チーム) など |

大規模災害時に他施設と連携して、野外救護所として機能的に使用できることが重要であると考えます。

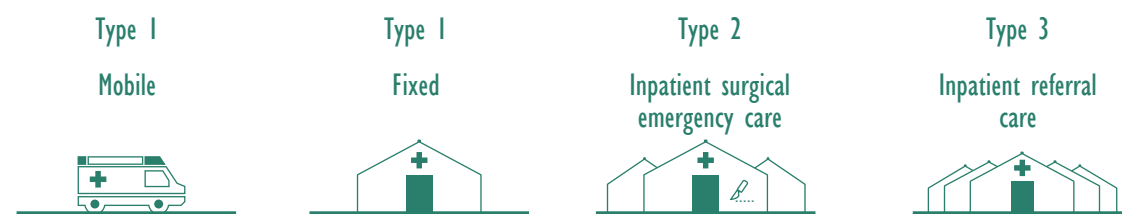


General Incorporated Association Field Medical Station Promotion Council

一般社団法人野外救護所普及推進協議会

代表理事 櫻井

TEL:026-214-6777

E-mail:yagai@airstation.jp

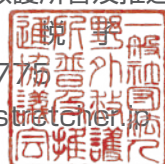


アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁（FEMA）・米国土安全省・指定シェルター

WESTERN SHELTER SYSTEMS



オレゴン州ユージーンを拠点とする移動式医療 シェルターシステムメーカー。
米国内では過去30年に亘りハリケーンや地震などの自然災害で活躍してまいりました。
日本ではコロナ禍において、発熱外来用の施設として全国約40施設で採用されています。


Alternate care site

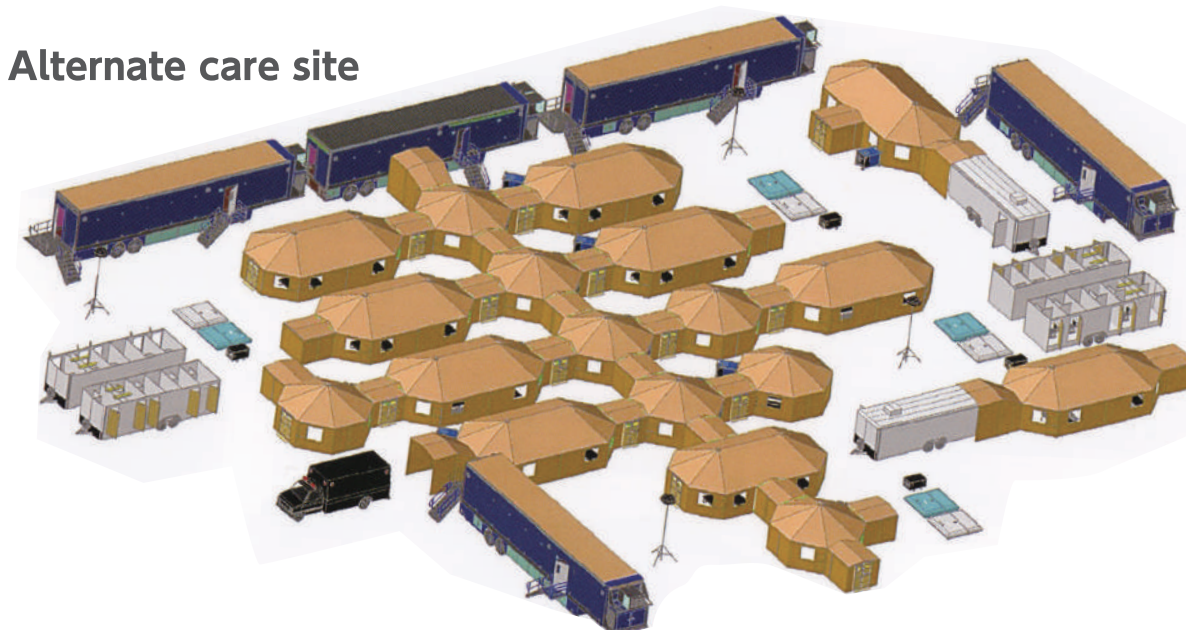

連結で広がる用途 コンテナとも接続可能



コンテナと接続して
シームレスに移動

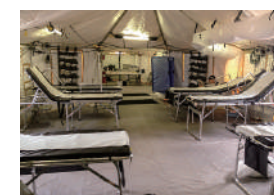

処置室や診察室、
待合室として



食堂や、
指揮本部として



レストルームや
シャワールームにも

ウエスタンシェルター9つの特徴



風に強い

連結可能


垂直壁面



雪に強い

断熱仕様

難燃外幕

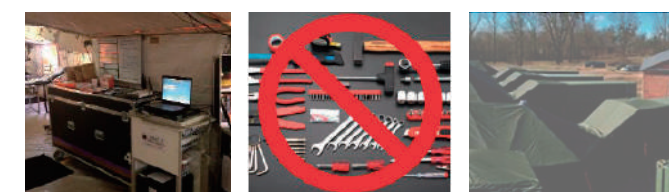

拡張対応

工具不要

接続可能

詳細を知りたい方
はこちら ▶

製品サイト



組立動画



災害用資器材(テント)

ウエスタンシェルターは世界各国の
災害現場で信頼性の高い移動式
医療システムを提供しています。

テント



組立動画

オプション





製品紹介

ゲートキーパー™1935 シェルターシステム

シリーズの中で最も大きい
広さ約53㎡の大型テントです。



- 診察室と患者ベッドを6台設置できる大型テントです。
- 特別な道具や機械を使用することなく短時間で組み立てられます。
- 壁面が床面と垂直になっており圧迫感なく壁際を使用可能です。

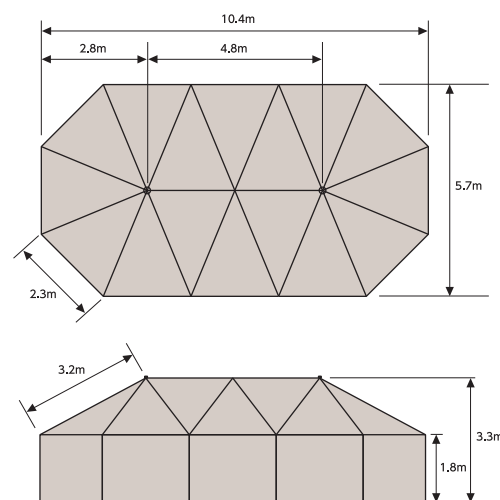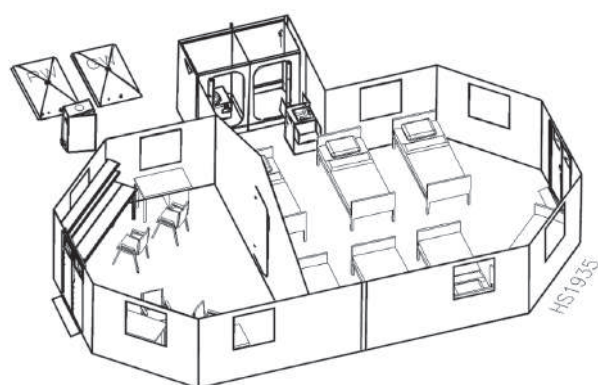

- 鍵付きドア2ヶ所に設置可能
- 大型窓8ヶ所(ビニール、網戸)
- ダクト窓8ヶ所

仕様

寸法	: 5.7(W)×10.4(D)×3.3(H)m	
面積	: 約53㎡	
重量	: 約333.5kg(分割梱包)	
設営時間	: 35分(4~5名)	
屋根部立ち上げ	: 20分	

標準付属品

フレーム(1)	ビニール壁(1)	ドア敷居板(2)
屋根換気口(2)	フロア床(1)	ペグ・ロープ(1)
ビニール屋根(1)	鍵付きドア(2)	ブルーシート(1)


品名

ゲートキーパー™1935シェルターシステム

品番 WSS-1935SW

ゲートキーパー™20シェルターシステム

1ドアまたは2ドアの選択可能な中型テントです。

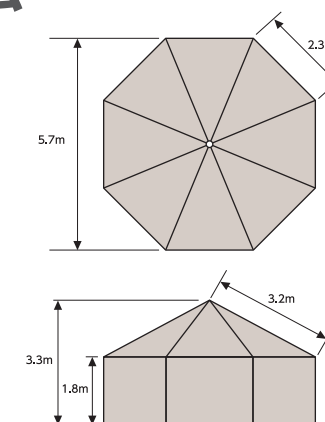

- シェルター同士を接続することで様々な用途に使用できます。
- 特別な道具や機械を使用することなく短時間で組み立てられます。
- 壁面が床面と垂直になっており圧迫感なく壁際を使用できます。

- 鍵付きドア1ヶ所/2ヶ所
- 大型窓4ヶ所(ビニール、網戸)
- ダクト窓8ヶ所

仕様

寸法	: 5.7(W)×5.7(D)×3.3(H)m	
面積	: 約26㎡	
重量	: 約179.9kg(分割梱包)	
設営時間	: 25分(4~5名)	
屋根部立ち上げ	: 16分	

標準付属品

フレーム(1)	ペグ・ロープ(1)
屋根換気口(1)	ブルーシート(1)
ビニール屋根(1)	鍵付きドア(1)*
ビニール壁(1)	ドア敷居板(1)*
フロア床(1)	※20SW-2Dは2つ

品名


ゲートキーパー™20シェルターシステム

1ドア 品番 WSS-20SW

2ドア 品番 WSS-20SW-2D

ゲートキーパー™16シェルターシステム

1ドアまたは2ドアの選択可能なコンパクトなテントです。

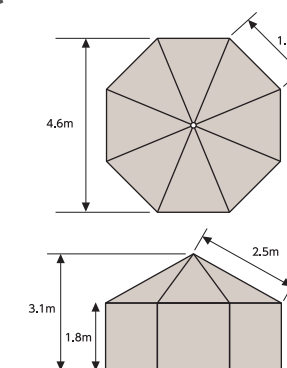

- 16シェルター同士を接続することで様々な用途に使用できます。
- 特別な道具や機械を使用することなく短時間で組み立てられます。
- 壁面が垂直に起立しており圧迫感なく壁際を使用できます。

- 鍵付きドア1ヶ所/2ヶ所
- 大型窓4ヶ所(ビニール、網戸)
- ダクト窓8ヶ所

仕様

寸法	: 4.6(W)×4.6(D)×3.1(H)m	
面積	: 約17.5㎡	
重量	: 約160kg(分割梱包)	
設営時間	: 20分(4~5名)	
屋根部立ち上げ	: 16分	

標準付属品

フレーム(1)	ペグ・ロープ(1)
屋根換気口(1)	ブルーシート(1)
ビニール屋根(1)	鍵付きドア(1)*
ビニール壁(1)	ドア敷居板(1)*
フロア床(1)	※16SW-2Dは2つ

品名

ゲートキーパー™16シェルターシステム

1ドア 品番 WSS-16SW


2ドア 品番 WSS-16SW-2D

除染シャワーテントシステム

品番 WSS-DS1


ウエスタンシェルターの除染シャワーテントシステムは、
アルミフレーム式のため高い耐久性を持ち、軽量で移動しやすい設計が施されています。

近年、NBC（放射線、生物、化学）災害への対応が求められています。
このような危機に備え、社会の安全を守るため、除染テントは不可欠な装備として、その需要が高まっています。
ウエスタンシェルターの本国アメリカではFEMAをはじめとして多くの災害対応機関で同テントが採用され、
近年日本国内でも採用が進んでいます。

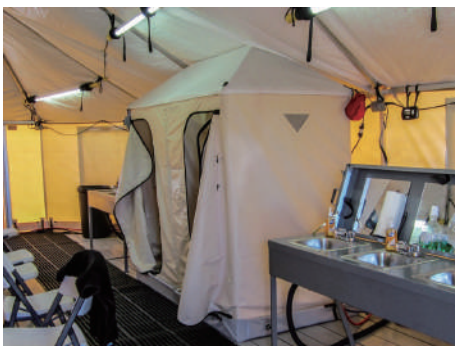


※写真は1レーンタイプ加工前の仕様です。

●テント平面・立面図

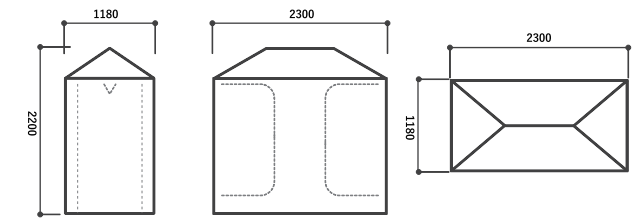

●システム図

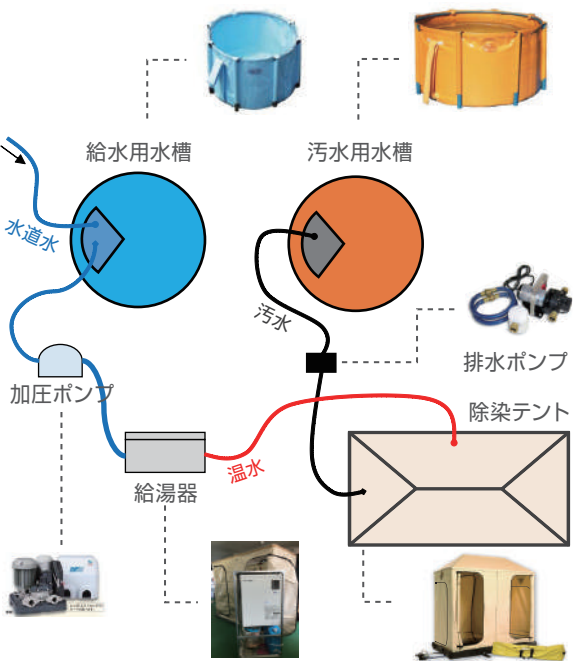

●テント本体・仕様

WA-SHWSDK:フィールドシャワー	
展張時寸法	約230×118×220cm
収納時寸法	約220×50×30cm
重量	約51kg（ソフトケース入り）
ハンドシャワー	2個
スノコ	2枚
排水ポンプ	1台

●セット内容

No.	部品名	個数
①	除染シャワーテント WA-SHWSDK	1セット
②	組立式水槽1000リットル（給水・排水用）	各1個
③	加圧ポンプ	1式
④	給湯器 F-WTHT	1式
⑤	ホースリール30m巻	1式
⑥	防雨型電源コード30m巻	1式
⑦	ブリッジコンベア	1式



ウエスタンシェルター国内導入実績

（敬称略/順不同）2024年12月時点

岩手医科大学 救急災害医学講座 災害医学分野(岩手)
堀ノ内病院(埼玉)
琉球大学医学部附属病院(沖縄)
千葉県済生会習志野病院(千葉)
岩手県立 宮古病院(岩手)
淀川キリスト教病院(大阪)
JA北海道厚生連 帯広厚生病院(北海道)
埼玉医科大学国際医療センター(埼玉)
長野県立信州医療センター(長野)
諏訪赤十字病院(長野)
上野原市立病院(山梨)
はびきの医療センター(大阪)
青梅市立総合病院(東京)
下伊那赤十字病院(長野)
北上済生会病院(岩手)
長野医療生活協同組合 長野中央病院(長野)
自治医科大学附属病院(栃木)
石垣クリニック(大阪)
JA長野厚生連浅間南麓こもろ医療センター(長野)
相愛会 相原第二病院(大阪)
JA長野厚生連 佐久総合病院(長野)
JA長野厚生連 佐久医療センター(長野)
長野県立こども病院(長野)
済生会新泉南病院(大阪)
掛川市(静岡)
秋田赤十字病院(秋田)
福井県(福井)
空飛ぶ捜索医療団「ARROWS」(広島)
大阪大学医学部附属病院(大阪)



トレーラーハウス：カタリナ

幅2.4m幅～、長さ6m～の「豊富なサイズの店舗モデル」

「カタリナ」シリーズはコラム（円柱）を基調に、店舗として利用した際に看板を取付けやすくするため正面の壁を高くしました。デッキ横のスペースはトイレや収納、ミニキッチン等に活用いただけます。

小型から大型まで豊富なサイズを取り揃えております。高級感あふれる「信州檜の内装仕上」の設定もご用意いたしました。



外観




内観

入り口横スペースは、仕切るとトイレやロッカールームに使用できます。


■ フロアプランの一例

幅2.4mは長さ6m～10m、幅3.4mは長さ8m～12mまで対応可能

カタリナ・6mx2.4m

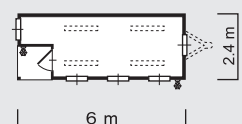

カタリナ・10mx3.4m

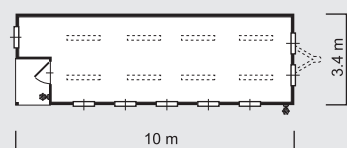

■ 仕様

- 構造
 - ・プレミアムシャーシ
 - ・床：12mm2重貼り（高耐水フロア仕上）
 - ・壁：正面壁2.9m仕様
- 屋根材
 - ・ガルバリウム銅板仕上（積雪対応）
- 外壁材
 - ・樹脂サイディング
- 断熱材
 - ・100mmグラスウール断熱（床・壁・天井）
- 玄関ポーチ
 - ・ウッドデッキ仕上

■ 各種装備

- 室内材
 - ・標準インテリア食（柄入りホワイトクロス）
 - ・木目調仕上げ窓回り
 - ・床：高耐水フロア
- 樹脂サッシ
 - ・全窓Low-Eペアガラス格子入り（省エネ仕様）
- 室内
 - ・天井照明（LED照明）
 - ・室内コンセント
 - ・エアコンコンセント
- エクステリア
 - ・ポーチライト防水型
 - ・屋外防水コンセント
- 装備
 - ・50AMP日本製ブレーカー

※ オプション装備に関しては、お問合せください。

■ カンバーランドのトレーラーハウスの特徴

高気密・高断熱構造

ペアガラス採用と省エネ住宅認証を取得した高断熱設計により、電気・燃料消費を抑えながら、高水準の陰圧・陽圧環境の維持が可能です。

特許技術による快適性・ユニバーサル設計

特許取得の構造・設備を採用し、室内は車いす対応のバリアフリー設計。床暖房（オプション）により呼吸器系にも配慮した快適な室内環境を実現します。

豊富なバリエーション

用途や設置環境に応じて選べる多彩なモデルをラインナップ。医療・店舗・宿泊など、さまざまな用途に柔軟に対応します。



用途にあったトレーラーハウスを探すなら。
トレーラーハウスの広さや目安については、こちら ▶



■ 採用事例



駐車場を活用した「移動式薬局」（広島県）

人口密集地の駐車場を活用した薬局として運用。
2カ所の拠点を活用し、年に2回程度移動しながら営業する日本でも珍しい運用形態を実現しています。
＜使用モデル：ランドブリッジ＞



県営住宅隣接の駐車場を活用した「小児科診療所」（長野県）

入居率が高い団地の子育て世帯に対応するため設置。
医師は隣市で開業しており、週末に診療を行っています。

＜使用モデル：クラブ＞



災害時、移設しながら運用した「支援者向け宿泊所」（石川県）

令和6年能登半島地震の発災直後から状況に応じて移設しながら活用。
2月：設置場所が確保できない中、利用可能な駐車場に設置し支援拠点として運用。
4月：状況の落ち着きに合わせ、公の広いスペースへ移設し支援者向け拠点として活用。
また、満床状態となっていたクリニックへ病室ユニット（21㎡）を1台提供しました。
＜使用モデル：カタリナ＞



災害時の「動物病院」（宮城県）

東日本大震災では多くのペットや家畜も被災し、飼い主と離れた動物たちは水や食料もない状況に置かれました。名取市では1人の獣医師がトレーラーハウスを拠点に寝泊まりしながら、動物たちの命を守る支援活動を行いました。
＜使用モデル：ランドブリッジ（連結）＞



「ボランティアセンター」⇒「店舗」へのコンバージョン（宮城県）

市役所も被災した気仙沼では、ボランティアセンターとして設置。
寒さ対策として暖かい場所を提供し、その後、市内の店舗として再活用されました。

＜使用モデル：エリート＞

パークトワイレ（トレーラーけん引型）

「トワイレ」とは、自己循環型の浄化処理技術と再生可能エネルギー蓄電システムを搭載し、ライフライン（上下水道・電気）が寸断された場合も衛生的に使える「自己処理型水洗トイレ」です。し尿を分解し、処理水として再利用するため、災害時でも継続的に利用できます。

（右の写真は令和6年能登半島地震、石川県珠洲市役所設置の様子）



株式会社カンバーランドは、1991年創業。米国FEMA（連邦災害対策局）にならい災害時のトレーラーハウス活用を提唱し、阪神淡路大震災から能登半島地震まで、仮設住宅や福祉避難所など累計300台以上のトレーラーハウスによる支援を行う。モバイル医療及び医療従事者の支援を目指し、野外科護所普及推進協議会副代表に就任。内閣府の「災害対応車両調整法人」日本第1号。


アクティブジャケット ミドルレイヤー(行動着)

- 要所に配置した **3M™ Scotchlite™** 反射材で周囲からの視認性を確保し夜間作業での対車両事故リスクを軽減。
- 多様なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつも見た目はスタイリッシュ。
- 多彩なコーディネートが可能。
- レディース対応も充実、ダイバーシティモデル。
- アクティブ&シャープな印象の立ち衿仕様。
- 高品質の日本製高通気ドビーストレッチ素材 



アッシュグレー ロイヤルブルー ガンメタル

■ワッペン取り付け位置(P31参照)
■ネームホルダー(市販品)取り付け可

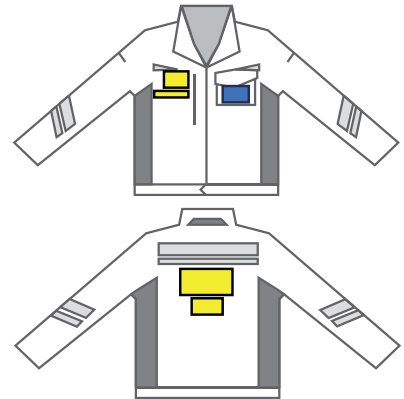

仕様

素 材：ポリエステル85%
綿15%
カラー：3 アッシュグレー 6 ロイヤルブルー
29 ガンメタル
サイズ：SS~5L

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	60	62	66	68	70	72	72	72
肩 巾	41	43	45	47	49	51	53	55
袖 丈	55.5	56.5	59.5	61.5	63.5	65.5	65.5	65.5
胸 囲	102	106	110	114	118	124	132	140

●  はレディース対応シルエットです。



3M™ Scotchlite™ Reflective Material 高性能反射布を使用しています。

品名 アクティブジャケット

品番 GZP-S223

アクティブパンツ



アッシュグレー ロイヤルブルー ガンメタル

仕様

素 材：ポリエステル85%
綿15%
カラー：3 アッシュグレー 6 ロイヤルブルー
29 ガンメタル
サイズ：SS~5L

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63.69	69.75	75.81	81.87	87.95	95.107	107.119	119.131
ヒップ	89	94	99	104	112	122	132	143
股 下	80	80	80	80	80	80	80	80
渡り巾	30	31.2	32.4	33.5	36	38.7	41.7	44.8
裾 巾	17.5	18	18.5	19	20	21	23	24

●  はレディース対応シルエットです。



3M™ Scotchlite™ Reflective Material 高性能反射布を使用しています。

品名 アクティブパンツ

品番 GZP-S233

高視認性防水防寒ブルゾン


■アウターレイヤー(兼保温着)

- 耐水圧20,000mm 透湿性3,000g/m²/24hの高性能高視認性防水防寒ウェア。
- 高品質の日本製高密度タフタを使用 
- **ORAFOL** 社製の高輝度プリズム型再帰性反射材を使用。
- ダウンを超えた軽量高性能保温綿 **"Primaloft®"** を使用した最高位モデル。
- JIS T 8127/EN ISO 20471 適合モデル。



イエロー オレンジ

■ワッペン取り付け位置(P31参照)

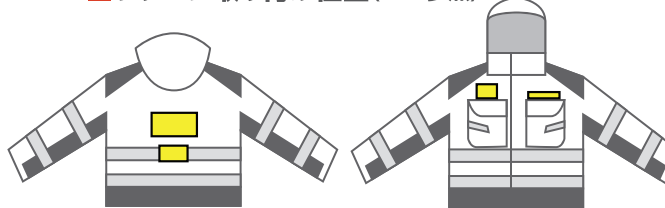

仕様

素 材：表：ポリエステル100% (耐水圧：20,000mm)
裏：ポリエステル100% (ディンプルメッシュ)
中綿：ポリエステル100%
カラー：7 イエロー 31 オレンジ
サイズ：M~3L・5L



ファスナー付内ポケット バックプリント対応 背中フリン仕様 手袋で操作がしやすいファスナーを採用 袖口カフはマジックテープで調節可能 ファスナー付脇ポケット

サイズ	M	L	LL	3L	5L
着 丈	68	70	72	74	74
肩 巾	55	57	59	61	65
袖 丈	60	62	64	66	66
胸 囲	128	133	138	143	153



JIS T 8127 CLASS 2 EN ISO 20471 CLASS 2 ORAFOL 社のReflexite® 高輝度プリズム型反射材を使用しています。

品名 高視認性防水防寒ブルゾン

品番 GZP-NP26

高視認性撥水防寒パンツ



ネイビー

仕様

素 材：表：ポリエステル90%・綿10%
裏：ポリエステル100%
中綿：ポリエステル100%
カラー：5 ネイビー
サイズ：M~4L

サイズ	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	75~81	81~87	87~95	95~107	107~119
股 下			78		



品名 高視認性撥水防寒パンツ


品番 GZP-NP25

表面に再帰反射性の高い微細なガラスビーズをコーティングした高性能再帰性反射布をしています。本反射製品の特性を十分ご理解頂き、反射材がお客様の使用用途に耐えうる性能を有しているか用途に応じて事前にご評価いただけますようお願いいたします。


- 洗濯は洗濯液温度40℃を上限とし、裏返してネットに入れて、洗濯機弱水流で洗濯してください。
- 洗濯表示に従って洗濯してください。
- 洗剤は中性洗剤をご使用ください。
- いかなる漂白剤も使用しないでください。漂白剤は反射材にダメージを与える恐れがありますので、使用しないでください。
- 柔軟剤の使用により反射性能が劣化しますので使用しないでください。
- ドライクリーニングは避けてください。
- 反射材へのアイロンは避けてください。
- タンブラー乾燥はしないでください。

ワッペン取り付け位置/サイズ

GZP-223 (アクティブジャケット)

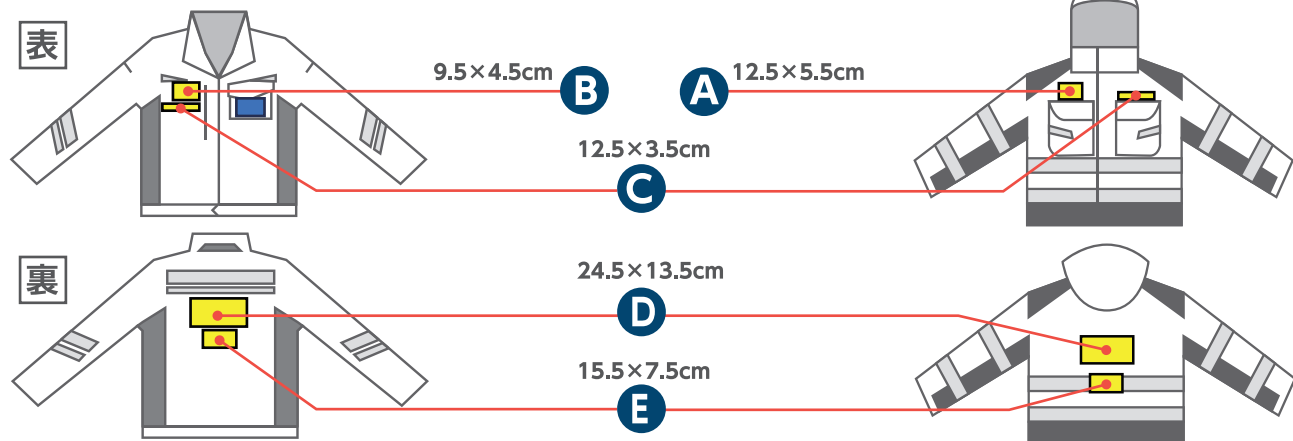

GZP-NP26 (高視認性防水防寒ブルゾン)

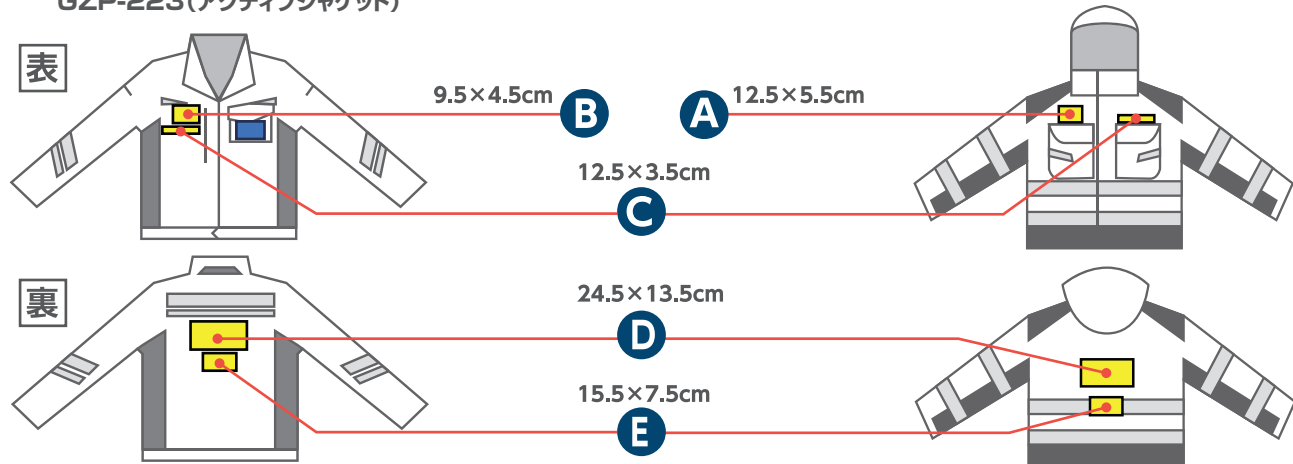

NKT-001 (オールシーズンベスト)



A DMATワッペン（胸部面用）



■品名 DMATワッペン（胸部面用）

品番 YPK-002

- 仕様
- サイズ：12.5cm×5.5cm (中)
- 県名入り

D DMATワッペン（背面用）



※所属施設名を併記しないワッペンも取り扱っております。

■仕様

- サイズ：24.5cm×13.5cm (大)
- 県名入り ●施設名入り

■品名 DMATワッペン（背面用）

品番 YPK-001

- 夜間の救助作業、薄暗い場所でも少量の光で反射する、反射生地にて3色でプリントされています。
- 水に濡れても丈夫なターボリンを採用。

[注意]
所属施設名併記の場合、12文字まで。
※13文字以上の場合ご相談ください。

B DMATワッペン（帽子・胸部面用）



■品名 DMATワッペン（帽子・胸部面用）

品番 YPK-003

- 仕様
- サイズ：9.5cm×4.5cm (小)
- 県名入り

取りはずし可能・反射板 マグネットDMATワッペン

- 反射板マグネットにDMAT表示を施してあります。



- 仕様
- サイズ：約20cm×40cm ●県名入り
- 品名
- マグネットDMATワッペン

県名・施設名印刷 品番 TAM-MW2
県名・施設名・オリジナルマーク印刷 品番 TAM-MW3

C 識別名札（胸部面用）

- 仕様
- サイズ：12.5cm×3.5cm
- カラー：赤、緑、黄、青、白



※余白部分には個人名又は所属施設名を入れられます（別途料金）。

■品名 識別名札（胸部面用）

(赤) 医師用	(緑) 看護師用	(黄) 業務調整員用	(青) 薬剤師用	(白) 検査技師用
品番 YPR-005	品番 YPR-006	品番 YPR-007	品番 YPR-008	品番 YPR-009

E 識別名札（背面用）

- 仕様
- サイズ：15.5cm×7.5cm
- カラー：赤、緑、黄、青、白



■品名 識別名札（背面用）

(赤) 医師用	(緑) 看護師用	(黄) 業務調整員用	(青) 薬剤師用	(白) 検査技師用
品番 YPK-010	品番 YPK-011	品番 YPK-012	品番 YPK-013	品番 YPK-014

※ C「識別名札(胸部面用)」, D「識別名札(背面用)」は反射生地を使用しておりません。

オリジナルワッペンの制作もご相談いただけます

CAPヘルメット（眼球保護シールド付き）

国家検定規格商品

距離が取れない救急現場では眼球からも飛沫感染のリスクが



■品名 CAPヘルメット（眼球保護シールド付き）

レッド 品番 GZP-3036F ブルー 品番 GZP-3033C

- 優れた通気性能により熱中対策に貢献。
- 業界最軽量クラス (510g)。
- 270mmワイドシールド面は簡易着脱可能。
- いつでも清潔、ワンタッチ着脱内装。
- より後頭部にフィットするラチェットアジャスターバンド。
- レインガード (雨垂れ防止溝) 付き。

オールシーズンベスト



- 通気性の良いメッシュ生地を採用。
- フルオープンポケット、無線機ポケット、IDカードホルダー、ペンホルダーを備えたハイスベック仕様。
- DMATワッペン (B・D) ・識別名札 (C・E) がついています。
- 反射テープ付き。

■仕様

- サイズ：フリーサイズ
- 色：ネイビー

■品名 オールシーズンベスト（多機能）

品番 NKT-001

帽子



- 前頭部に反射板DMAT ワッペン (B) 付き。
- 調整ベルト部分は反射マーカー付きで夜間の救助作業も安全に。
- DMATワッペンを取り外し洗濯も可能。
- DMATワッペン無しもあります。

■仕様

- サイズ：フリーサイズ
- 色：ネイビー
- 材質：綿100%

■品名 帽子

DMATワッペン有	品番 GZP-285
DMATワッペン無	品番 GZP-286

安全靴



- 甲被：牛革（型押ソフト）
- 踏み抜き防止板内蔵、長編み上げ式です。

■仕様

- サイズ：22cm～28cm (0.5cm刻み)

■品名 安全靴

品番 TAN-219

トリアージ区域・立ち入り禁止テープ・トリアージ用タッグセット



- トリアージタッグとトリアージ区域・立ち入り禁止テープ (緑・黄・赤・黒) のセットです。

■仕様

- サイズ：(外箱サイズ) 26cm×23cm×11cm (テープ1巻・非粘着) 6cm×50m 各色各1巻 計4巻 (トリアージタグ) 100枚

■品名 トリアージ区域・立ち入り禁止テープ・トリアージ用タッグセット

品番 BOU-381

トリアージ用タッグ



- 表面3枚複写、災害現場用、搬送機関用、収容医療機関用、色識別用ラベルマシン目入り、上部ゴム輪付。

※仕様は、厚生労働省医政局指導課 (平成8年3月12日指第15号) 様式に準じています。

■仕様

- サイズ：11cm×23.2cm (1枚)
- 材質：濡れに強いユボ紙

■品名 トリアージ用タッグ 100枚入り

品番 ETS-010

トリアージ区域・立ち入り禁止テープセット



- 緑、黄、赤、黒の4巻4色のトリアージ区域・立ち入り禁止テープです。
- 屋外ではもちろん、院内病室出入口等を囲い、一般の入場者を立ち禁止にします。

- トリアージエリアを囲み、安全地帯・待機場所を作ります。
- ※バラでの販売も可能ですのでお問い合わせください。

■仕様

- サイズ：テープ1巻6cm×50m 各色各1巻 計4巻 (非粘着)

■品名 トリアージ区域・立ち入り禁止テープセット

品番 DMA-T04

【受注生産】災害支援チーム携行バッグ

チームワッペンが着脱可能で、普段用や学会等での出張用としてマルチに使用できるバッグです。
※こちらの製品は受注生産となっております。そのため、製造工程にお時間をいただく場合がございます。
納期につきましては、お早めにお問い合わせいただければ幸いです。
※ワッペンは別売りです。

ウエストバッグ



仕様

サイズ : 約10.5(幅)×26.5(長さ)×16(マチ)cm
加工 : ワッペンベースベルクロ加工
素材 : 撥水ナイロン
重さ : 約300g
容量 : 約4ℓ

品名 ウエストバッグ

品番 EMB-101

全てのバッグで
ワッペンは取外しができ、
普段使いができます。



ソフトキャリーバッグ



バッグ内部は、仕切りで
自由なレイアウトが可能

仕様

サイズ : 約43(幅)×70(高さ)×28(奥行)cm
加工 : ワッペンベースベルクロ加工
素材 : 撥水ナイロン
重さ : 約5kg
容量 : 約70ℓ

品名 ソフトキャリーバッグ

品番 EMB-102

3WAY ビジネスバッグ



ソフトブリーフ



バックパック



ショルダーバッグ



容量は瞬時に拡張可能



ビジネスバッグは
キャリーバッグのハンドル
を通せる仕様です。

仕様

サイズ : 約40(幅)×30(高さ)×14(マチ)cm
加工 : ワッペンベースベルクロ加工
素材 : 撥水ナイロン
重さ : 約1.2kg
容量 : 約16ℓ(拡張可能)

品名 3WAY ビジネスバッグ

品番 EMB-103

マルチポケット バックパック



仕様

サイズ : 約48(幅)×76(高さ)×28(マチ)cm
加工 : ワッペンベースベルクロ加工
素材 : 撥水ナイロン
重さ : 約1.2kg
容量 : 約45ℓ

品名 マルチポケット バックパック

品番 EMB-104



暗闇で、しっかり光る反射ワッペン

災害支援受け入れ資器材キット

能登半島地震において医療崩壊を防ぐために全国から災害支援チームが病院や施設に入り支援を開始したが、特に奥能登エリアでは宿舎や休憩場所の確保が困難な状況で、車中泊や施設廊下で仮眠を取るなど、過酷な状況での支援が続きました。
長期にわたり災害支援チームのクオリティを維持した支援を継続していただくには、病院や施設において最低限の環境を整えられるよう、受け入れ資器材を備蓄しておく必要があると我々は考えております。

この資器材は災害支援チームのみに限らず、新興感染症が発生した場合の職員の方々の休憩や仮眠場所としても使用することができます。

〈キット内容〉 ※1チーム:医師、看護師、調整員を含む5名を想定

SSK-401	一人用パーテーション	× 5台
EZB-002	キャピーハコベル®ベッド	× 5台
RCY-060	キャピー®レスト	× 5台



一人用パーテーション



キャピーハコベル®ベッド (p17)



キャピー®レスト



〈使用イメージ〉

品名 災害支援受け入れ資器材キット

品番 EAK-001

※各製品の詳細は個別のページをご確認ください。

一人用パーテーション

コンパクト収納で、一息つけるプライベート空間を
ポップアップ式で簡単に作れます。

- 高さがあるので、立ったまま着替えなどが行えます。
- 簡易ベッドを置いて、動線、荷物スペースを確保できます。
- 天井メッシュ構造で、圧迫感のない居室を実現しています。

仕様

サイズ : 展開時 約110(幅)×240(奥行)×180(高さ)cm
収納時 約85cm
重さ : 約4.5kg
材質 : ポリエステル(特殊アルミコーティング仕様)
仕様 : 識別ポケット(A5)、ポップアップ式展開
付属品 : 収納袋、フロアシート、接続ポール×5本

品名 一人用パーテーション

品番 SSK-401



一息つけるプライベート空間を簡単に



天井メッシュ構造で圧迫感のない居室

〈収納時〉

キャピー®レスト

非常時でも安心して眠れる、持ち運び便利なエアーマットです。
災害時の強力なサポートアイテムです。

- 自吸式のためポンプ等の道具がいらず、バルブをひねれば膨らみます。
- 当社エアーストレッシャーシリーズの製品にも使用されているエアーマットです。
- 収納袋には対空信号をプリントしてあるので、非常時に活躍します。

仕様

サイズ : 展開時 約60(幅)×180(長さ)×5(高さ)cm
収納時 約20×60(高さ)cm
重量 : 約1.9kg
仕様 : 自吸式エアバルブ、内部撥水加工
付属品 : 収納袋(対空信号プリント)

品名 キャピー®レスト

品番 RCY-060



〈収納時〉



サイドスリットがあるので、
方が一膨らんでも取り出しやすい設計



収納袋おもて面(対空布板信号)
※対空国際救難信号



収納袋なか面(対空徒手信号)
※対空国際救難信号

感染症対策製品

感染防止対策は日常の課題です。

私たちは、比較的低コストで
有効なご提案を行っています。

ユーリーチェアー



収納方法動画

ポップアップ・
アイソレーター




収納方法動画



飛沫拡散防止対策カバー ポップアップ・アイソレーター[®]

救急隊員・医療従事者への飛沫・エアロゾルでの感染対策に。

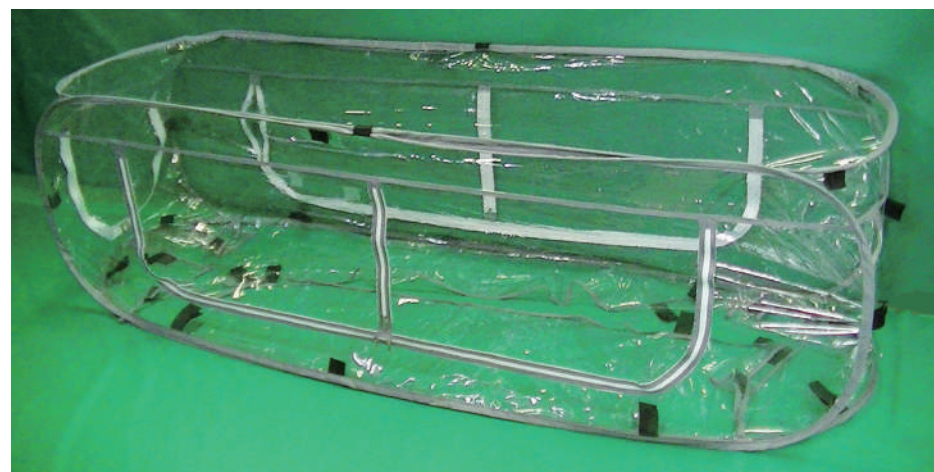

救急隊員使用例



医療従事者使用例

- 新型コロナウイルスが疑われる傷病者を搬送する際に数秒でストレッチャー上に設置可能
- 傷病者を観察・処置するための窓（ファスナー式）を頭部および左右に配置
- 使用後は消毒・清拭して繰り返し使用可能
- 使用後はコンパクトに収納

仕様

サイズ：使用時200×60×60(100)cm
収納時Φ60×10cm
重さ：約3.6kg

標準付属品

センターポール2本
コーナーポール4本（連結式）
収納袋



品名

ポップアップ・アイソレーター[®]

品番 PIY-001

アップバー（1本）

オプション

天面の歪みを矯正します。



品名 アップバー（1本） 品番 PIY-OS8



プライバシー保護カバー

オプション



品名

プライバシー保護カバー

グレー 品番 PIY-OP6

グリーン 品番 PIY-OP7

飛沫拡散防止対策カバー ユーリー[®]チェアー

車いすを使用した感染症患者の搬送時の飛沫拡散防止対策に!!

- 高い透明度で、患者の様子がよく分かる。
- 使用後は消毒、清拭し繰り返しの使用が可能。



上下から開閉できるダブルファスナーと開閉を安定させるアップバーが付属



保管時はコンパクトに畳め、使用時はワンタッチで展開が可能



両サイドのアームカバーから手を入れて処置が可能

仕様

サイズ：使用時約47×47×108cm
収納時約Φ40×9cm
重さ：約1.0kg

標準付属品

アップバー1本
収納袋

品名

ユーリー[®]チェアー

品番 PIY-002



※車いすは付属しておりません。

大容量 移動式 陰圧空気清浄機

*一次、二次、HEPAフィルターによる三段濾過。

病院の手術室やクリーンルームなどで使用されるHEPAフィルター搭載!!

移動式モデル
Novair700
品番 NPA700

仕様

風量（無段階調整）：17.2～5.0m³/分(100VAC) 19.8～5.7m³/分(115VAC)
重量：18Kg
寸法：幅60×奥行65×高さ58cm
電圧・電流：100～115VAC(50Hz/60Hz) 3.1～3.5A(50Hz/60Hz)

中型モデル
Novair1000
品番 NPA1000

仕様

風量（H/L 2段切替）：H23.6m³/分(50Hz) L11.8m³/分(50Hz)
H28.3m³/分(60Hz) L14.2m³/分(60Hz)
重量：42Kg
寸法：幅51×奥行58×高さ102cm
電圧・電流：100～115VAC(50Hz/60Hz) 4.2～5A(50Hz/60Hz)

小型軽量モデル
HAP-500
品番 NPA500

仕様

風量（無段階調整）：12.33～7.1m³/分(100VAC) 14.2～8.2m³/分(115VAC)
重量：15Kg
寸法：幅40×奥行64×高さ64cm
電圧・電流：100～115VAC(50Hz/60Hz) 2.2～2.5A(50Hz/60Hz)

大型モデル
Novair2000
品番 NPA2000

仕様

風量（H/L 2段切替）：H47.3m³/分(50Hz) L23.6m³/分(50Hz)
H56.7m³/分(60Hz) L28.3m³/分(60Hz)
重量：61Kg
寸法：幅66×奥行94×高さ79cm
電圧・電流：100～115VAC(50Hz/60Hz) 13～15A(50Hz/60Hz)

CAPボディーバッグセット



感染・臭い・漏れを防止。
焼却しても有害物質が出ない
透明特殊フィルム納体袋

- バリア性のあるシリカ蒸着の透明フィルムを使用。
- 左右どちらからも開閉可能なトリプルチャック。
- 故人の顔を見て葬儀が可能。

仕様 フィルム納体袋

サイズ：使用時 84cm×220cm 収納時 約28cm×42cm×2cm
重さ：約500g
仕様：トリプルチャック、スライダー2個
材質：シリカ蒸着透明特殊フィルム
酸素透過度：5.0ml/(m²・d・MPa)
水蒸気透過度：0.5g/(m²・d)

品名 CAPボディーバッグセット

品番 SKS-001 ※最小発注単位5枚

※CAPボディーバッグとCAPディスプレイストレッチャー・シート(p11)のセットです。



